


happylegs®

automatische looptrainer

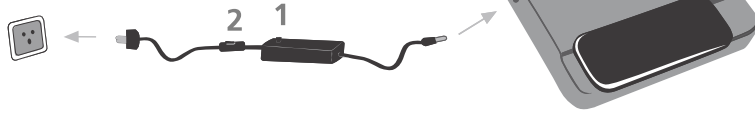

Ingebruikname:

De doos bevat 1 Happylegs-bewegingstrainer en 1 transformator*.

De Happylegs-bewegingstrainer is uitgerust met een zuinige motor met laag energieverbruik. Het apparaat wordt met de 3-standen-transformator aangesloten op het stopcontact.

Om uw Happylegs-trainer te gebruiken, sluit u eenvoudig de transformator aan op de ingang aan de voorzijde van het apparaat en steekt u vervolgens de stekker van de transformator in het stopcontact. Om het apparaat aan en uit te zetten, gebruikt u de schakelaar op de voedingskabel (2). Met de snelheidskeuzeschakelaar kunt u de gewenste snelheid instellen (1).

De hellingshoek van de Happylegs kunt u aanpassen met behulp van de 2 in hoogte verstelbare pootjes aan de lage kant (3). Happylegs brengt uw benen automatisch, zonder inspanning in beweging, forceer de bewegingen niet.

**Het Happylegs Premium model wordt geleverd met een afstandsbediening, zie de meegeleverde instructies.*

1 Snelheidskeuzeschakelaar

2 Schakelaar



Selecteer de gewenste snelheid:

chakel de transformator (2) in en kies de gewenste snelheid (1).

- **9 V Langzaam:** it is een rustige snelheid voor mensen die herstellen van een blessure of last hebben van stijve gewrichten of vermoeide benen. Deze stand is geschikt voor urenlang gebruik.
- **12 V Normal:** aangeraden voor langdurig gebruik, circa 6-8 uur, thuis of op het werk.
- **15 V Snel:** gebruik van deze snelheid is afhankelijk van de leeftijd en gezondheid van de gebruiker.

Is de gebruiker op leeftijd of is er sprake van vermoeidheidsklachten, dan wordt een gebruik gedurende perioden van 2 tot 3 uur per dag aangeraden.

Overige gebruikers kunnen het apparaat op deze stand 6-8 uur per dag gebruiken.


Reiniging en onderhoud:

Nooit op het apparaat gaan staan, belasting met vol gewicht kan schade toebrengen aan het inwendige werksmechanisme en doet de garantie vervallen. Regelmatig onderhoud is niet nodig; Happylegs is ontwikkeld voor langdurig onafgebroken gebruik. Schoonmaken van het apparaat kan met een droge doek, nadat het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald.



happylegs®

automatische looptrainer

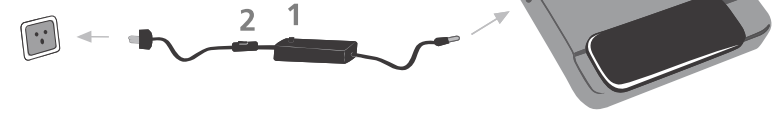

Ingebruikname:

De doos bevat 1 Happylegs-bewegingstrainer en 1 transformator*.

De Happylegs-bewegingstrainer is uitgerust met een zuinige motor met laag energieverbruik. Het apparaat wordt met de 3-standen-transformator aangesloten op het stopcontact.

Om uw Happylegs-trainer te gebruiken, sluit u eenvoudig de transformator aan op de ingang aan de voorzijde van het apparaat en steekt u vervolgens de stekker van de transformator in het stopcontact. Om het apparaat aan en uit te zetten, gebruikt u de schakelaar op de voedingskabel (2). Met de snelheidskeuzeschakelaar kunt u de gewenste snelheid instellen (1).

De hellingshoek van de Happylegs kunt u aanpassen met behulp van de 2 in hoogte verstelbare pootjes aan de lage kant (3). Happylegs brengt uw benen automatisch, zonder inspanning in beweging, forceer de bewegingen niet.

**Het Happylegs Premium model wordt geleverd met een afstandsbediening, zie de meegeleverde instructies.*

1 Snelheidskeuzeschakelaar

2 Schakelaar



Selecteer de gewenste snelheid:

chakel de transformator (2) in en kies de gewenste snelheid (1).

- **9 V Langzaam:** it is een rustige snelheid voor mensen die herstellen van een blessure of last hebben van stijve gewrichten of vermoeide benen. Deze stand is geschikt voor urenlang gebruik.
- **12 V Normal:** aangeraden voor langdurig gebruik, circa 6-8 uur, thuis of op het werk.
- **15 V Snel:** gebruik van deze snelheid is afhankelijk van de leeftijd en gezondheid van de gebruiker.

Is de gebruiker op leeftijd of is er sprake van vermoeidheidsklachten, dan wordt een gebruik gedurende perioden van 2 tot 3 uur per dag aangeraden.

Overige gebruikers kunnen het apparaat op deze stand 6-8 uur per dag gebruiken.

Reiniging en onderhoud:

Nooit op het apparaat gaan staan, belasting met vol gewicht kan schade toebrengen aan het inwendige werksmechanisme en doet de garantie vervallen. Regelmatig onderhoud is niet nodig; Happylegs is ontwikkeld voor langdurig onafgebroken gebruik. Schoonmaken van het apparaat kan met een droge doek, nadat het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald.



Vervoer en opslag: De Happylegs is een elektrisch apparaat: voorkom dat er vloeistof op het apparaat wordt gemorst en sla het niet op in een vochtige omgeving. Stel het apparaat ook niet bloot aan temperaturen boven de 60°C. Transporteer de Happylegs in de meegeleverde verpakking. Neem bij een defect contact op met uw leverancier. Laat dit apparaat niet door onbevoegden demonteren of repareren.

Technische specificatie:

De Happylegs werkt op netvoeding via een transformator die exclusief voor Autoergon 2002 is ontwikkeld. Gebruik geen onderdelen of accessoires die niet door de officiële fabrikant of leverancier van Happylegs zijn geleverd.

- Werkt op netvoeding.
- Ingangsspanning: 110-240 V// 50-60Hz 1,5A ~
- Uitgangsspanning: 9V/ 12V/ 15V 3A ==

Pequeño electrodoméstico. B. Klasse II. RoHS



Garantievoorwaarden en CE markering

De Happylegs is vervaardigd uit hoogwaardig materiaal, heeft de beste kwaliteitscontroles doorstaan en de onderdelen zijn van de hoogste kwaliteit. Hierdoor voldoet het product aan de geldende regels betreffende CE-markering binnen Europa. De garantie is van toepassing op alle defecten ten gevolge van fabricage- of materiaalfouten. Op de Happylegs-trainer geldt een garantie van 5 jaar vanaf de aankoopdatum. Op externe onderdelen geldt een garantie van 2 jaar. Bij defecten van onderdelen dient u contact op te nemen met uw leverancier waar u het betreffende onderdeel hebt gekocht.

In de volgende gevallen is de garantie niet van toepassing:

- Als het apparaat op onjuiste wijze of in strijd met de gebruiksinstructies wordt gebruikt.
- Bij schade die is ontstaan door een ruwe behandeling, stoten, vallen of pletten, beschadiging door brand of overstromingen.
- Als de voedingskabel defect raakt of niet meer werkt als gevolg van onjuist gebruik of onachtzaamheid.
- Bij demontage of behandeling van het apparaat door personen die niet voor Autoergon 2002 werken.

De garantiehouders bezit alle minimale rechten die bij wet zijn toegekend (wet 23/2003 betreffende de garanties bij de verkoop van consumptiegoederen, gepubliceerd in het Spaanse staatsbulletin B.O.E. (Boletín Oficial del Estado) op 11 juli 2003, waarin opgenomen de richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999).

Verwijdering en recycling van elektrische en elektronische apparaten:

1. Het symbool met de doorgekruiste afvalcontainer geeft aan dat dit apparaat voldoet aan Richtlijn 2002/96/EG.
2. Elektrische of elektronische apparaten mogen uitsluitend op de voorgeschreven wijze bij hiertoe aangewezen inzamelpunten worden ingeleverd. Een juiste verwijdering en behandeling van defecte producten draagt bij aan een beperking van de risico's voor de volksgezondheid en het milieu.
3. Neem voor meer informatie over het afvoeren van uw elektrische en/of elektronische apparaten contact op met de lokale autoriteiten of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Vervoer en opslag: De Happylegs is een elektrisch apparaat: voorkom dat er vloeistof op het apparaat wordt gemorst en sla het niet op in een vochtige omgeving. Stel het apparaat ook niet bloot aan temperaturen boven de 60°C. Transporteer de Happylegs in de meegeleverde verpakking. Neem bij een defect contact op met uw leverancier. Laat dit apparaat niet door onbevoegden demonteren of repareren.

Technische specificatie:

De Happylegs werkt op netvoeding via een transformator die exclusief voor Autoergon 2002 is ontwikkeld. Gebruik geen onderdelen of accessoires die niet door de officiële fabrikant of leverancier van Happylegs zijn geleverd.

- Werkt op netvoeding.
- Ingangsspanning: 110-240 V// 50-60Hz 1,5A ~
- Uitgangsspanning: 9V/ 12V/ 15V 3A ==

Pequeño electrodoméstico. B. Klasse II. RoHS



Garantievoorwaarden en CE markering

De Happylegs is vervaardigd uit hoogwaardig materiaal, heeft de beste kwaliteitscontroles doorstaan en de onderdelen zijn van de hoogste kwaliteit. Hierdoor voldoet het product aan de geldende regels betreffende CE-markering binnen Europa. De garantie is van toepassing op alle defecten ten gevolge van fabricage- of materiaalfouten. Op de Happylegs-trainer geldt een garantie van 5 jaar vanaf de aankoopdatum. Op externe onderdelen geldt een garantie van 2 jaar. Bij defecten van onderdelen dient u contact op te nemen met uw leverancier waar u het betreffende onderdeel hebt gekocht.

In de volgende gevallen is de garantie niet van toepassing:

- Als het apparaat op onjuiste wijze of in strijd met de gebruiksinstructies wordt gebruikt.
- Bij schade die is ontstaan door een ruwe behandeling, stoten, vallen of pletten, beschadiging door brand of overstromingen.
- Als de voedingskabel defect raakt of niet meer werkt als gevolg van onjuist gebruik of onachtzaamheid.
- Bij demontage of behandeling van het apparaat door personen die niet voor Autoergon 2002 werken.

De garantiehouders bezit alle minimale rechten die bij wet zijn toegekend (wet 23/2003 betreffende de garanties bij de verkoop van consumptiegoederen, gepubliceerd in het Spaanse staatsbulletin B.O.E. (Boletín Oficial del Estado) op 11 juli 2003, waarin opgenomen de richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999).

Verwijdering en recycling van elektrische en elektronische apparaten:

1. Het symbool met de doorgekruiste afvalcontainer geeft aan dat dit apparaat voldoet aan Richtlijn 2002/96/EG.
2. Elektrische of elektronische apparaten mogen uitsluitend op de voorgeschreven wijze bij hiertoe aangewezen inzamelpunten worden ingeleverd. Een juiste verwijdering en behandeling van defecte producten draagt bij aan een beperking van de risico's voor de volksgezondheid en het milieu.
3. Neem voor meer informatie over het afvoeren van uw elektrische en/of elektronische apparaten contact op met de lokale autoriteiten of de winkel waar u het product hebt gekocht.